

## Guía de operación simple del microscopio digital

1. Abra el paquete y saque el microscopio, y conecte el microscopio al host de la computadora (asegúrese de que el microscopio y el enchufe de la computadora estén enchufados sin holgura)


2. Instale el software: inicie sesión en <http://soft.hvscam.com> para descargar el software y seleccione el icono HiViewSetup.exe para abrirlo, luego haga clic en Siguiente---Acepto---"Instalar---"Finalizar

3. Haga doble clic en el icono del escritorio para abrir el software. Después de ingresar al software, verá la siguiente interfaz:

1. Abra el paquete y saque el microscopio, y conecte el microscopio a la computadora principal (asegúrese de que los enchufes del microscopio y la computadora estén en su lugar y no sueltos)


2. Instale el software: Inicie sesión en <http://soft.hvscam.com> para descargar el software, seleccione y abra el icono HiViewSetup.exe y luego haga clic en Siguiente---Recibir ---Instalar ---Finalizar

3. Haga doble clic en el icono HiViewSetup.exe en el escritorio para abrir el software y después de ingresar al software, verá la siguiente interfaz:

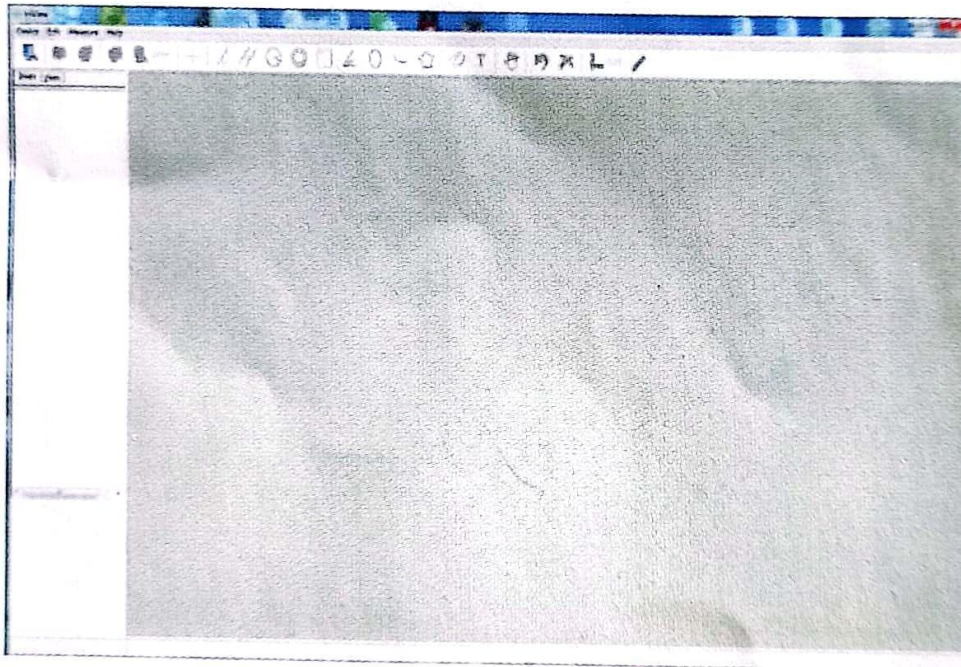

4. Haga clic en "Dispositivo" en la barra de menú y luego haga clic en "Abrir" y seleccione el nombre del dispositivo del microscopio, el color, la compresión y la resolución de la imagen, etc.:

4. Haga clic en "Dispositivo" en la barra de menú y luego haga clic en "Abrir" y seleccione el nombre del dispositivo del microscopio, el color/compresión y la resolución de la imagen, y así sucesivamente:

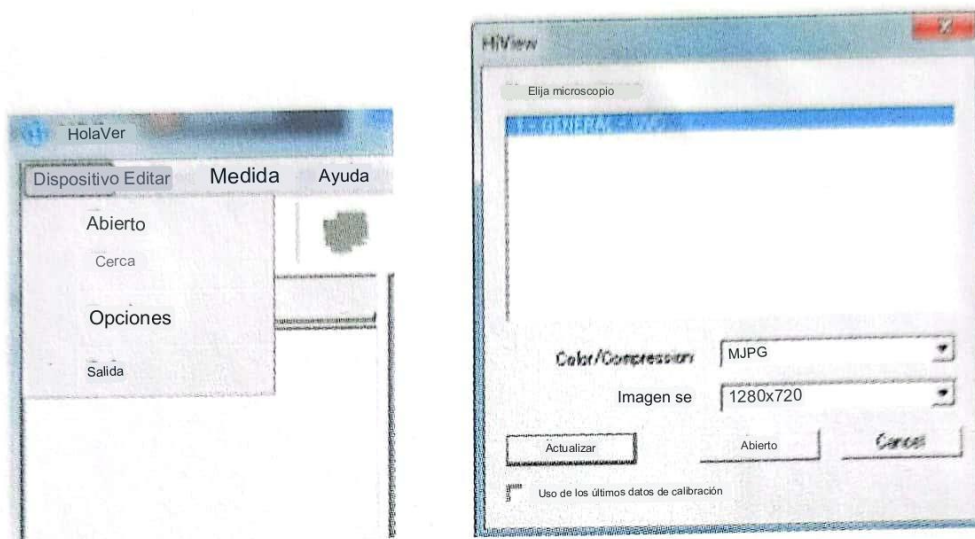


5. Haga clic en "Abrir" para ingresar a la página del sistema para realizar varias operaciones, como se muestra en la siguiente figura:

(¡Precaución! Microscopio y detalles del software)


Para obtener instrucciones, descargue el manual electrónico).

5. Haga clic en "Abrir" para ingresar a la página del sistema para implementar varias operaciones, como se muestra a continuación: (¡Nota! Descargue el manual para obtener instrucciones detalladas sobre el microscopio y el software)

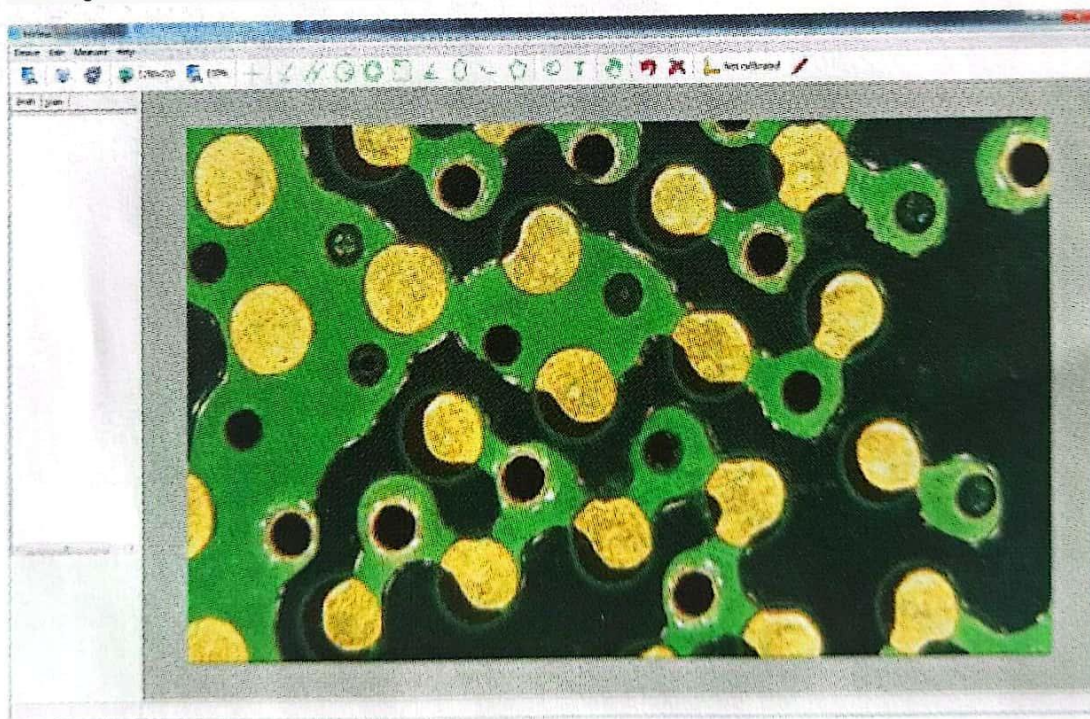

6. A continuación se muestran los ejemplos de medición y dibujo lineal y otros ejemplos operativos:



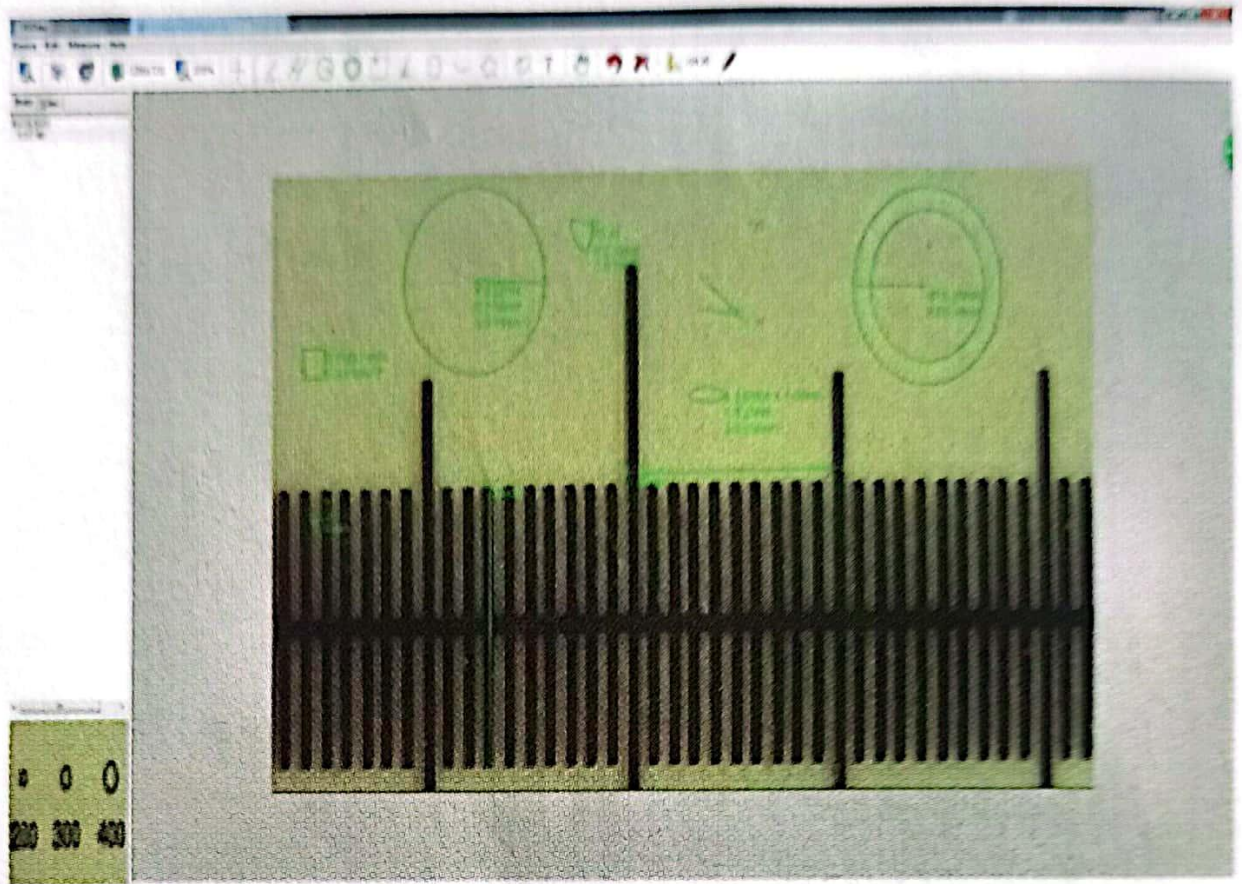

Nota: Debido a las actualizaciones del software del producto, no se puede usar el botón ZOOM en el cuerpo original. Utilice esta función en "Modificar escala de visualización" en el software. Nota: Debido a la actualización del software del producto, no se puede usar el botón "ZOOM" en el cuerpo. Utilice "ZOOM" en el software. ,