



PHS-3C PHMETER



Estimado cliente,

Gracias por elegir nuestro producto. Este manual le proporcionará la información necesaria para un correcto funcionamiento. Léalo atentamente antes de usar el medidor.

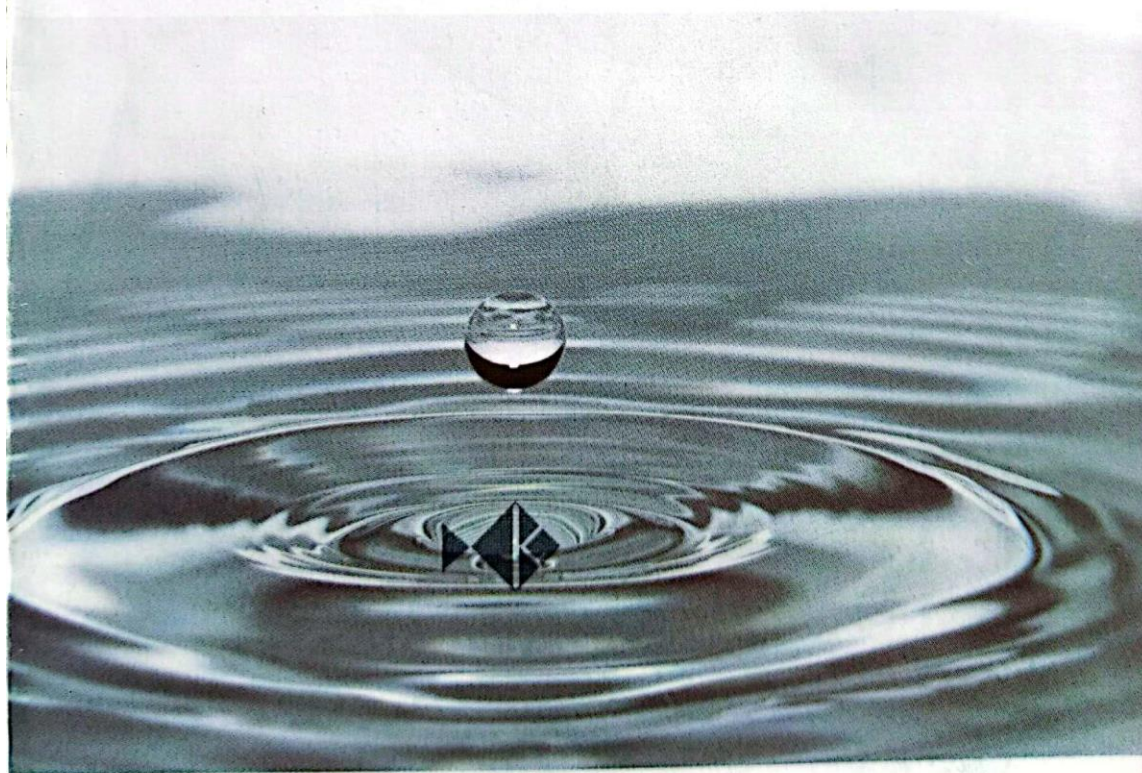

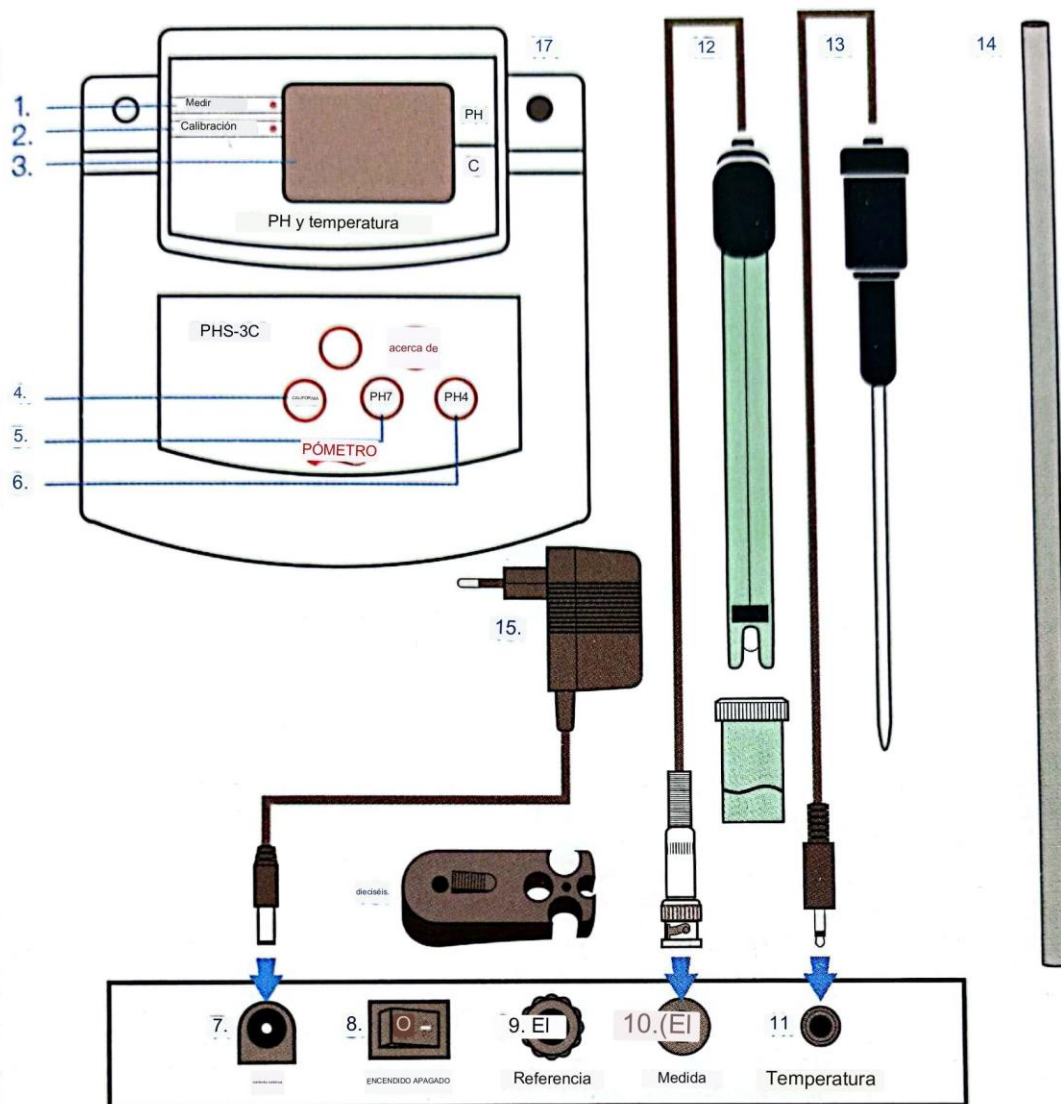

Descripción del panel frontal

1. Indicador de medida
2. Indicador CAL
3. Pantalla
4. Perilla CAL
5. Perilla de ajuste de calibración PH7
6. Perilla de ajuste de calibración PH4

Descripción del panel posterior

7. Terminal de entrada de CA
8. Interruptor de función [ENCENDIDO/APAGADO]
9. Electrodo de referencia
10. Terminal de entrada del electrodo de pH
11. Terminal de entrada del electrodo de temperatura

12. Electrodo de pH y tapa protectora del electrodo

13. Electrodo de temperatura
14. Enlace fijo
15. Adaptador
16. Portaelectrodos
17. Orificio de montaje

• ESPECIFICACIONES

Rango	pH	0.00 14.00PH
	Temperatura	0~100C
Resolución	pH	0.01pH
	Temperatura	0.1C
Exactitud	Temperatura	±0.01pH
	de	±0,5 C
Mostrar	pH	4 LED digitales
	Temperatura	3 LED digitales
Compensación automática de temperatura		0°C~50°C
Fuente de alimentación		En etiqueta
Temperatura de funcionamiento		0°C~50°C
Calibración		2 puntos con reconocimiento automático de búfer

Garantía

Estos instrumentos están garantizados contra todo defecto de material y fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra. Si durante este período se requiere la reparación o el reemplazo de piezas donde el daño no se debe a negligencia o operación incorrecta por el usuario, devuelva las piezas al distribuidor o a nuestras oficinas, y la reparación se realizará sin cargo.

OPERACIÓN

1. Conexión de la fuente de alimentación de CA. Encienda el medidor con el interruptor "ON-OFF" ubicado en la parte posterior del instrumento.
2. Conecte el electrodo al conector posterior del instrumento.
3. Retire la tapa protectora del electrodo. Coloque el electrodo en la solución medida que se va a probar.

Calibración .PH

1. Vierta una pequeña cantidad de solución de pH 6,86, pH 4,00 y pH 9,18 en vasos de precipitados limpios.
2. Para una calibración particularmente precisa, se recomienda utilizar dos vasos de precipitados para cada solución tampón; el primero se utilizará para enjuagar el electrodo, el segundo se utilizará para la calibración. De esta forma, los riesgos de contaminar la solución tampón son reducido al mínimo.
3. Encienda el instrumento.
4. Sumerja el electrodo en una solución tampón de pH 6,86 y agítelo suavemente hasta que la lectura se estabilice.
5. Pulse el botón "CAL" hasta que se encienda el indicador de calibración. Luego presione "PH7" hasta que la pantalla muestre "6.86". Enjuague el electrodo con agua destilada.
6. Sumerja el electrodo en una solución tampón de pH 4,00 y agítelo suavemente hasta que la lectura se estabilice.
7. Pulse el botón "CAL" hasta que se encienda el indicador de calibración. Luego presione "PH4" hasta que la pantalla muestre "4.00". Enjuague el electrodo con agua destilada.
8. Sumerja el electrodo en una solución tampón PH9.18. Esperando a que la lectura se estabilice hasta que la pantalla muestre exactamente 9.18.

9. La calibración del rango de pH del instrumento ahora está completa.

Importante:

El rango de pH del instrumento debe volver a calibrarse siempre que: 'El electrodo haya sido utilizado (colocado) durante mucho tiempo desde la última calibración.

El electrodo se ha utilizado en condiciones especialmente exigentes.


Se requiere la máxima precisión.



*Reemplace el nuevo electrodo.

Asuntos que requieren atención:


Mantenga los electrodos limpios.

El bulbo del electrodo de pH es muy frágil, no lo toque.

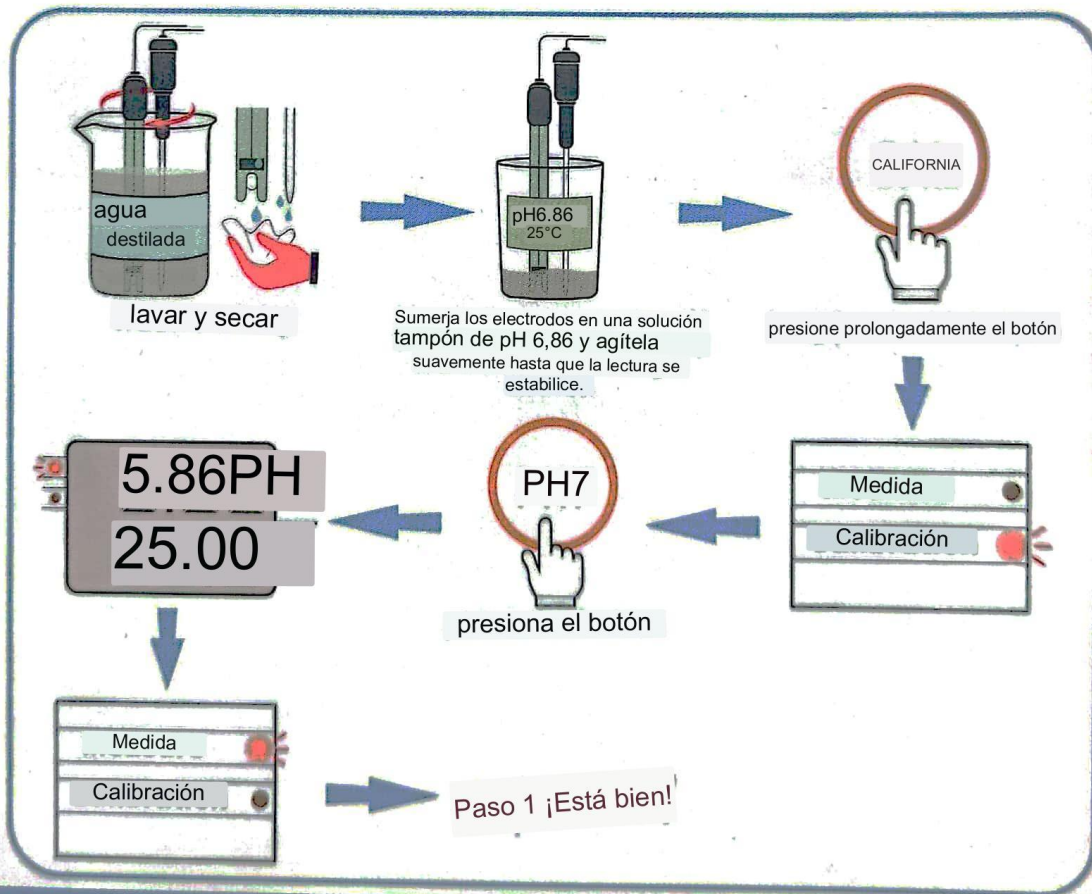

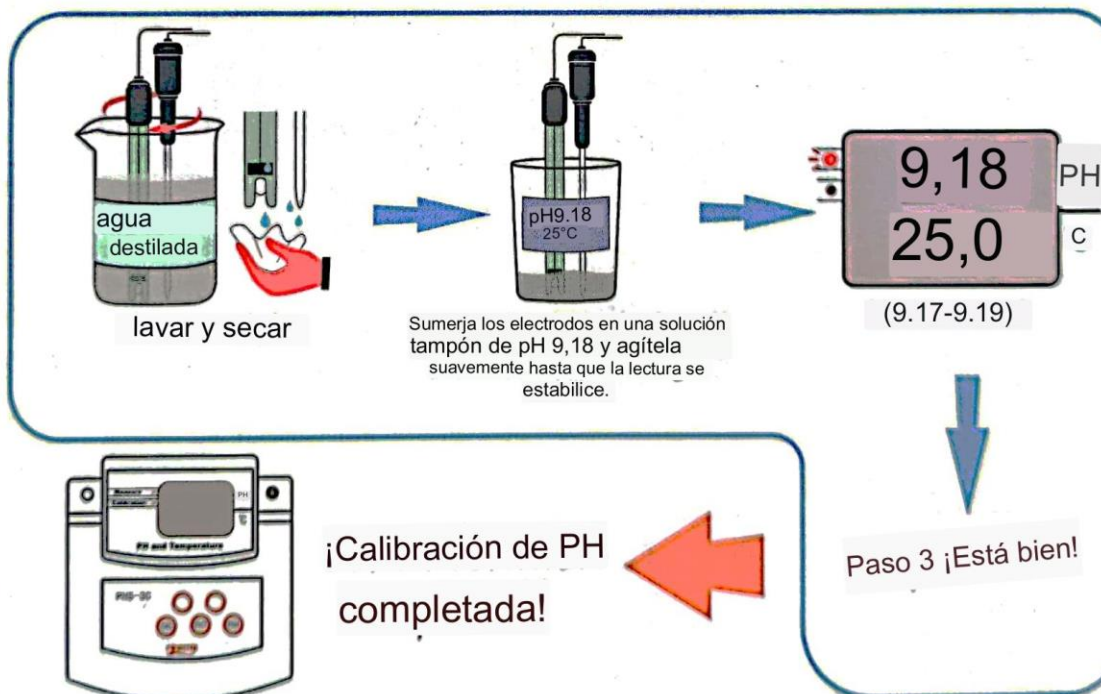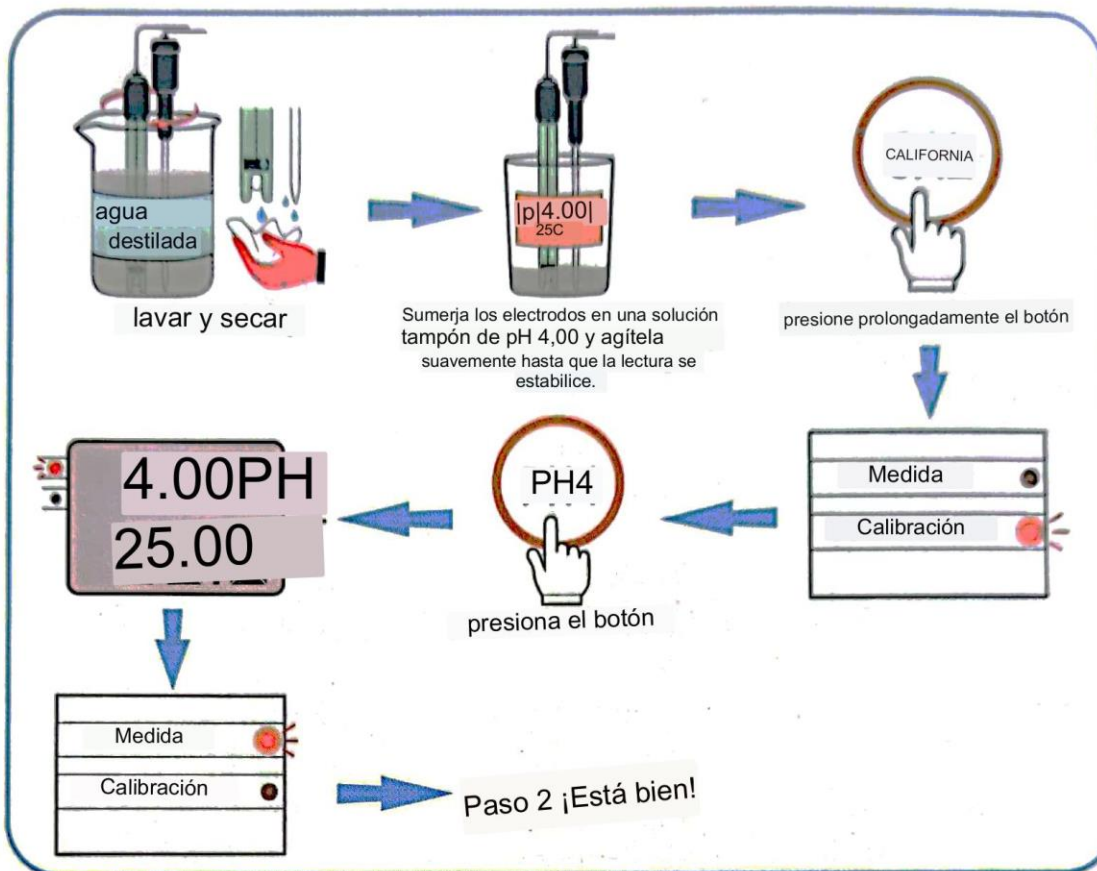

SOLICITUD

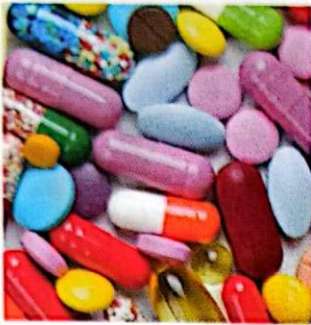

vacío




piscina




laboratorio




Acuario

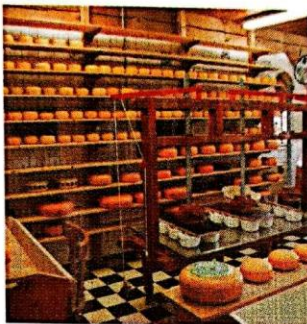

procesamiento de alimentos

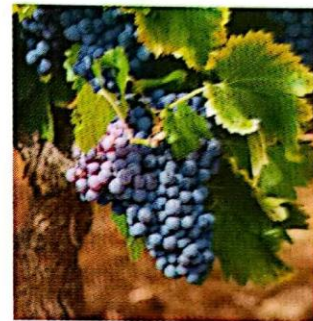

cultivar

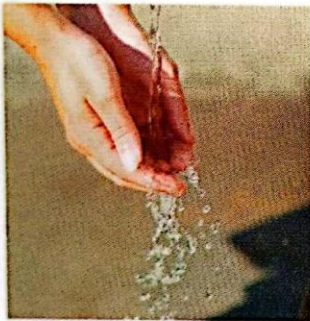

agua



agua potable



suelo



fábrica



piel



la cría de animales